



Event Review

Install and Update Quick Reference

イベントレビューインストール簡易説明書

バージョン3.5対応

イベントレビューアップデート簡易説明書

バージョン3.1対応

レールダルメディカルジャパン株式会社

マーケティング部


イベントレビュー3.5 インストールガイド

インストール要件


- Microsoft Windows 2000 SP4以降またはWindows XP Pro SP2以降のオペレーションシステム
- Internet Explorer 6.0
- 500MHz以上のプロセッサ
- 256Mb以上のRAM
- 300Mb以上のハードディスク空き容量
- インストール用CD-ROMドライブ
- データカードリーダー（TYPE II）
- インターネット接続環境

インストール手順

Frameworkのインストール

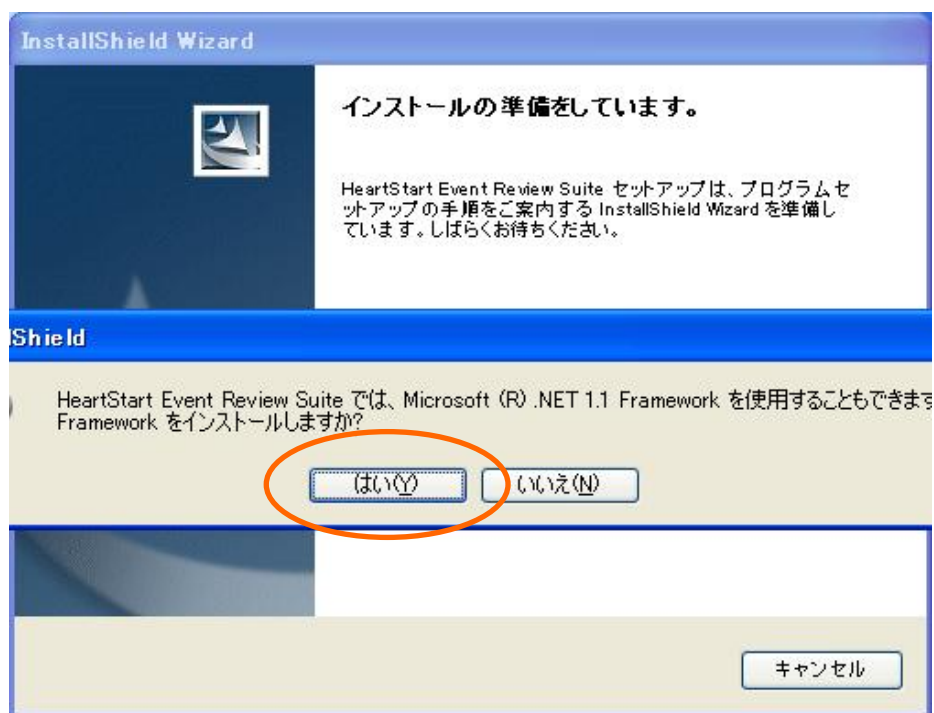

PCにCDを挿入すると左図が表示されます。「はい」をクリックしてください。インストールが始まります。

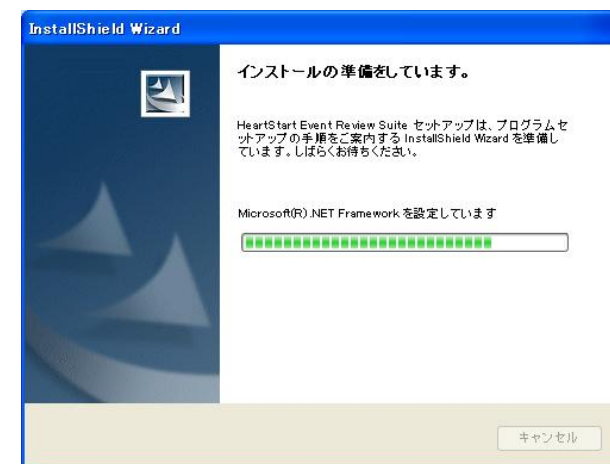

インストール手順


イベントレビュー3.5のインストール



イベントレビュー3.5のインストール準備を始めます。「次へ」をクリックしてください。

インストール手順

使用許諾契約

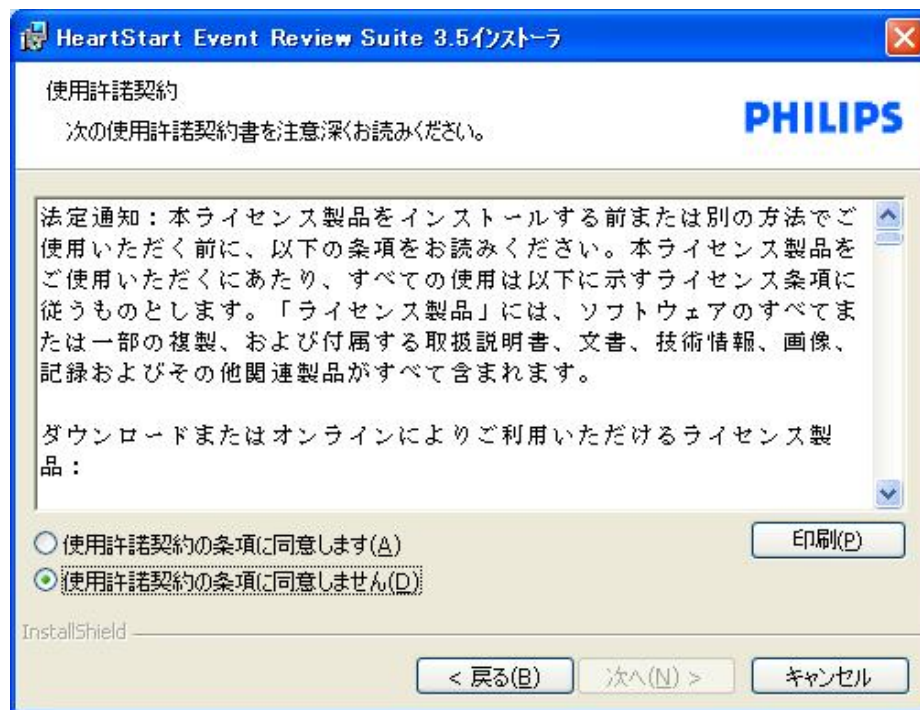

使用許諾契約内容に同意される場合は、「使用許諾契約の条項に同意します」にチェックをして「次へ」をクリックします。

インストール手順

ユーザー情報入力



HeartStart Event Review Suite 3.5 インストーラ

ユーザー情報
情報を入力してください。

ユーザー名(U):
||

所属(O):
|

InstallShield

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル


ユーザー名と所属の組織名を入力して、「次へ」をクリックしてください。

インストール手順

情報と最新ニュース表示（英語表示）



内容を確認のうえ、「次へ」をクリックしてください。インストールが開始されます。

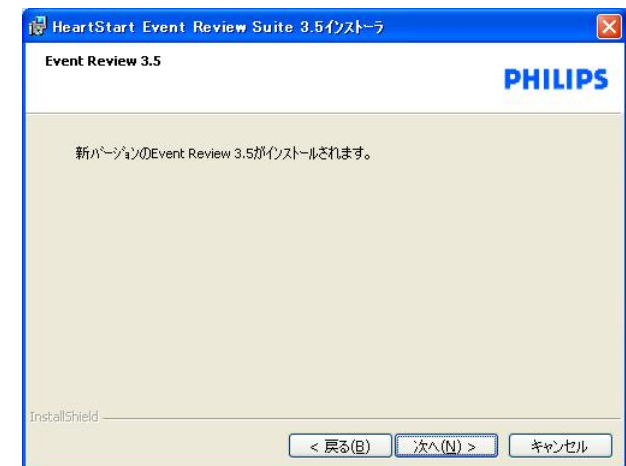


インストール手順

インストール先の指定



ハードディスク内のインストール場所を指定し、「次へ」をクリックし、「インストール」をクリックしてください。

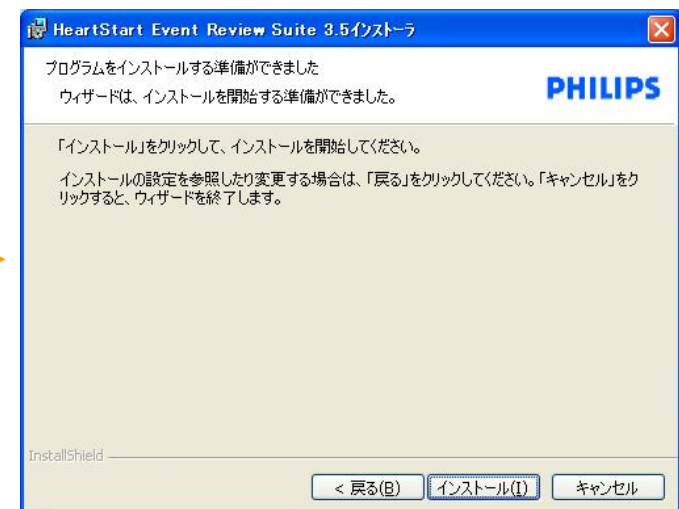

インストール手順

インストールが開始されます。
右図が表示されたら、「完了」
をクリックしてインストール作
業を終了してください。



インストールの完了



ユーザー登録

ユーザー登録

ER ライセンスマネージャ

登録画面ようこそ

Event Review をご利用いただき誠にありがとうございます。

すでに Event Review をご購入済みの場合は、登録を行ってソフトウェアを有効にしてください。

ご注意：登録しない場合は、30日の試用期間終了後、ソフトウェアが機能しなくなります。

0 期限まであと 30 日 30

☒ 今すぐ登録する

☐ 今すぐ購入する

☐ 製品登録を後で行う

当社 Web サイトを表示 PHILIPS

< 戻る 次へ > 終了

Event Reviewを立ち上げると左図が表示されます。登録される場合は「今すぐ登録する」にチェックして「次へ」をクリックします。

登録を行わない場合は、30日間で使用不可となります。

ユーザー登録

オンライン登録開始

ER ライセンスマネージャ

登録して本製品を有効にする

Event Review をご利用いただき誠にありがとうございます。

登録が完了すると、電子メールでソフトウェアキーが直接お手元に届きます。製品を完全に有効にするには、このソフトウェアキーを以下に入力する必要があります。

[当社 Web サイトでオンライン登録を行う](#)

キーを入力

注記：登録キーは電話で取得することもできます。カスタマーサービス、1-206-664-7745 または 1-800-263-3342（米国内はフリーダイヤル）までご連絡ください（英語での対応になります）。

[個人情報に関する規定を表示](#)


< 戻る 次へ > 終了

「当社 Web サイトでオンライン登録を行う」をクリックして、登録専用ページを表示させます。

注：インターネット接続環境が必要です。

ユーザー登録


PHILIPSウェブサイトの表示

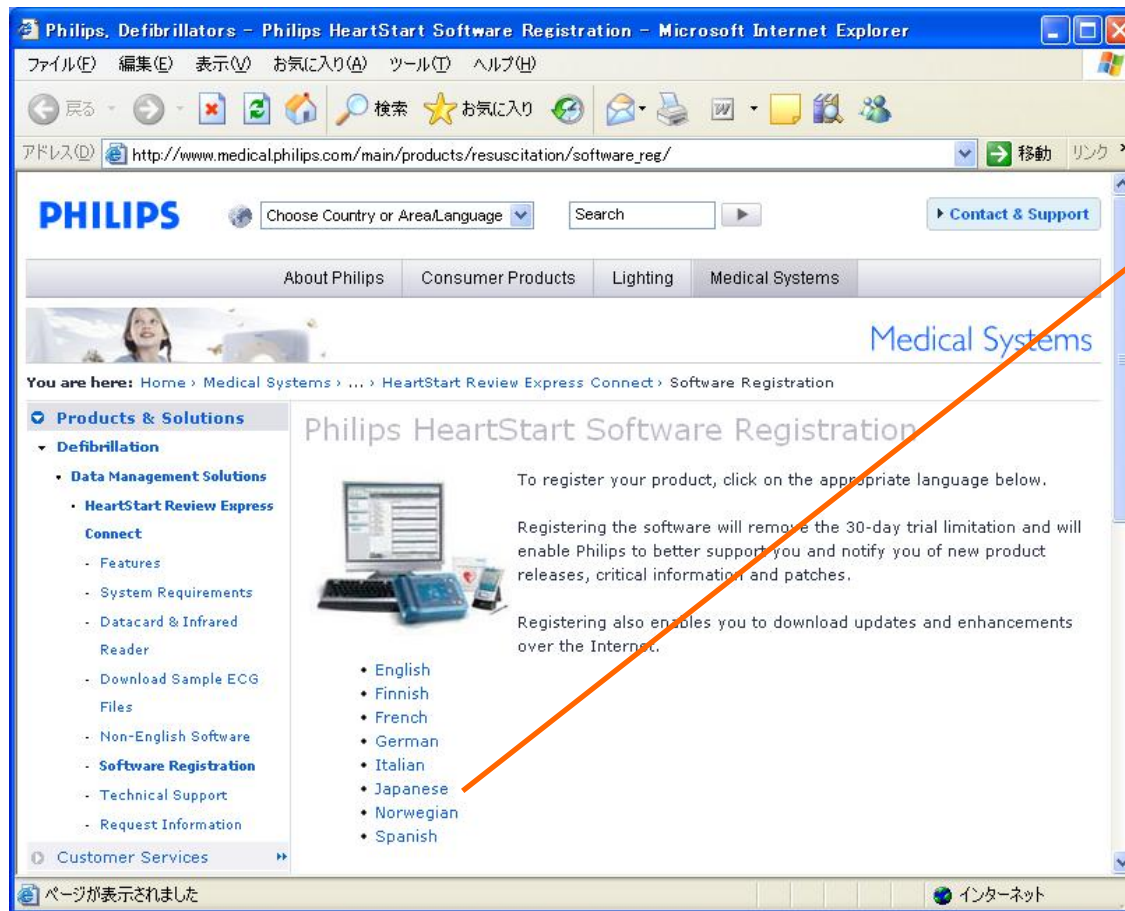

PHILIPS Medical Systemsのウェブサイトが表示されたら、「Japanese」をクリックします。

ユーザー登録

Event Review 3.5をクリック

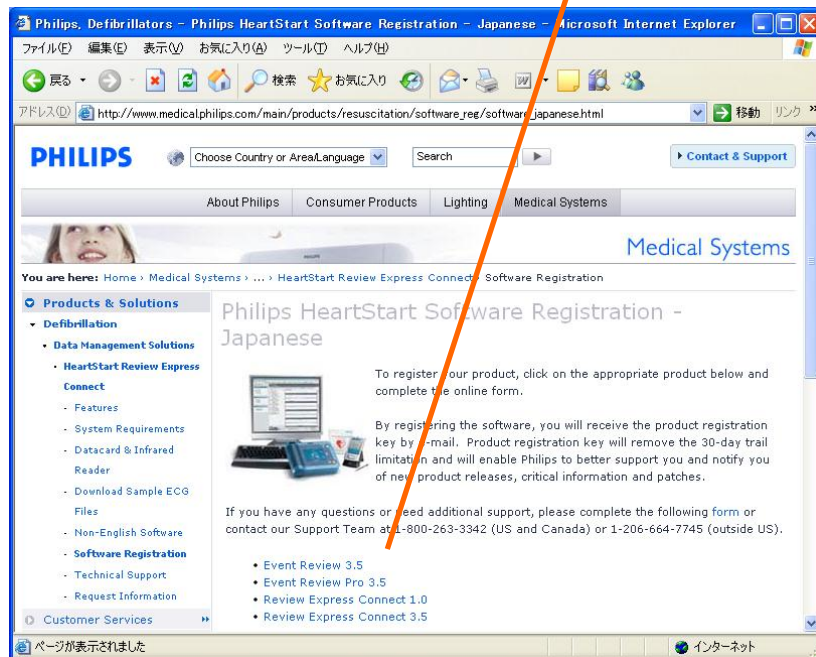

個人情報の入力



ユーザー登録

個人情報の入力

Event Review 3.5 Japanese - Microsoft Internet Explorer

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

戻る 進む 印刷 検索 お気に入り 移動 リンク

アドレス http://www3.medicalphilips.com/resources/hsg/docs/en-us/custom/EventReview35_JPN_detail.asp

*マークは入力必須項目です。

個人情報

敬称 ☐ 教授 ☐ 医師 ☐ Mr. ☐ Mrs. ☐ Ms

*姓

*名

*役職

*ご施設名(会社・学校・団体名)

*ご住所

住所 2

*市町村名

*都道府県名

*郵便番号

*国 -- select a country --

*電話番号

*Eメール

*Eメール再入力

送信 リセット

インターネット

※印内に情報を入力して「送信」をクリックします。
送信後に登録したEメールアドレスに「登録キー」が届きます。

送信前の確認画面

Internet Explorer

インターネットへ情報を送信するときに、その情報をほかの人から読み取られる可能性があります。続行しますか？

☒ 今後、このメッセージを表示しない

はい(Y) いいえ(N)

ユーザー登録

登録キーの入力

ER ライセンスマネージャ

登録して本製品を有効にする

Event Review をご利用いただき誠にありがとうございます。

登録が終わると、電子メールでソフトウェアキーが直接お手元に届きます。製品を完全に有効にするには、このソフトウェアキーを以下に入力する必要があります。

[当社 Web サイトでオンライン登録を行う](#)

キーを入力

注記：登録キーは電話で取得することもできます。カスタマーサービス、1-206-664-7745 または 1-800-263-3342（米国内はフリーダイヤル）までご連絡ください（英語での対応になります）。

[個人情報に関する規定を表示](#)

< 戻る 次へ > 終了

登録画面に戻り、メールに記載された「登録キー」を入力してください。

認証画面

Event Review

Event Review 認証されました。

OK

ユーザー登録

認証完了画面の表示

ER ライセンスマネージャ

完了しました。完了したタスクのサマリーが以下に表示されます。

この製品は次の方に登録されています：

次の方にライセンスされています：	組織名：

< 戻る 完了 終了

認証後に完了画面が表示されますので、「完了もしくは「終了」をクリックしてください。

イベントレビュー3.5の立ち上げ

イベントレビュー3.5の初期画面



ソフトウェアの使用方法につきましては、「ヘルプ」内にある「取扱説明書」を参考ください。

イベントレビュー3.1 アップデートガイド

バージョン3.5へのアップデート

注意点




- インターネットへ接続が必須となります。
- Event Review 3.5 インストール中に Event Review 3.1 プログラムは削除されます。
- Event Review 3.5 は「デスクトップ上に」ハート形のショートカットを作成しません。
- アップデートプログラムのダウンロードには、回線の状況によっては数時間掛かる場合がございます。

アップデート用パッチファイルのダウンロード

- I. http://www.medical.philips.com/goto/EventReview_3_1_Patch にアクセスしアップデート用パッチファイルをダウンロードします。


※ 「updateservice_er3.1」は圧縮されているので、
「保存」した後「解凍」する方法をお勧めします

- II. 保存後、「解凍」を行って下さい。

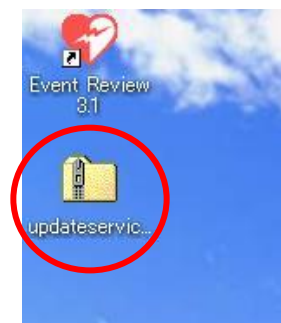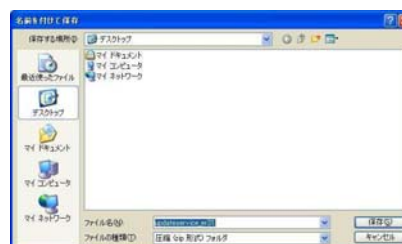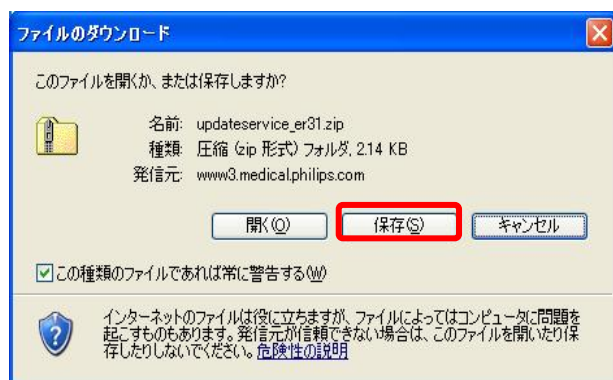

アップデート用パッチファイルの実行


1. 「解凍」したフォルダーに 「UpdateService_ER31」 ファイルが作成されます。ダブルクリックして、「実行」をして下さい。

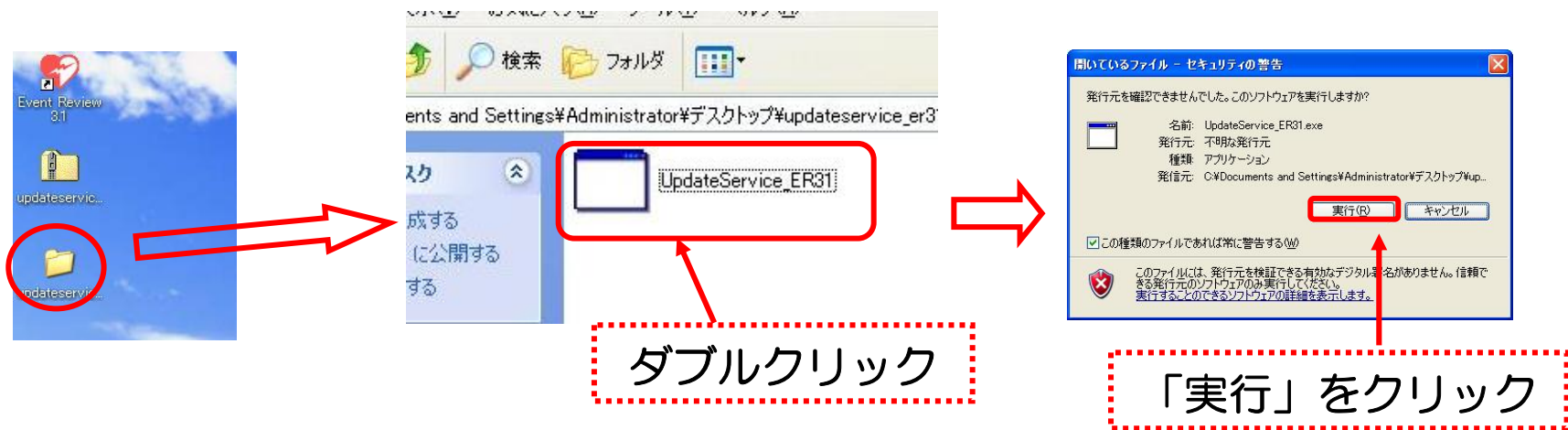

※ アップデート用パッチファイルを「実行」しなければ
Event Review 3.5 へのアップデートが行えません

アップデートの確認

- I. Event Review 3.1 を起動し、「Help」 → 「Check For Updates」をクリックします。
- II. 「Software Manager」ウィンドウが開き、アップデートファイル「Event Review 3.5.1」ファイルへチェックを入れ 「Download Only」 ボタンをクリックし保存します。

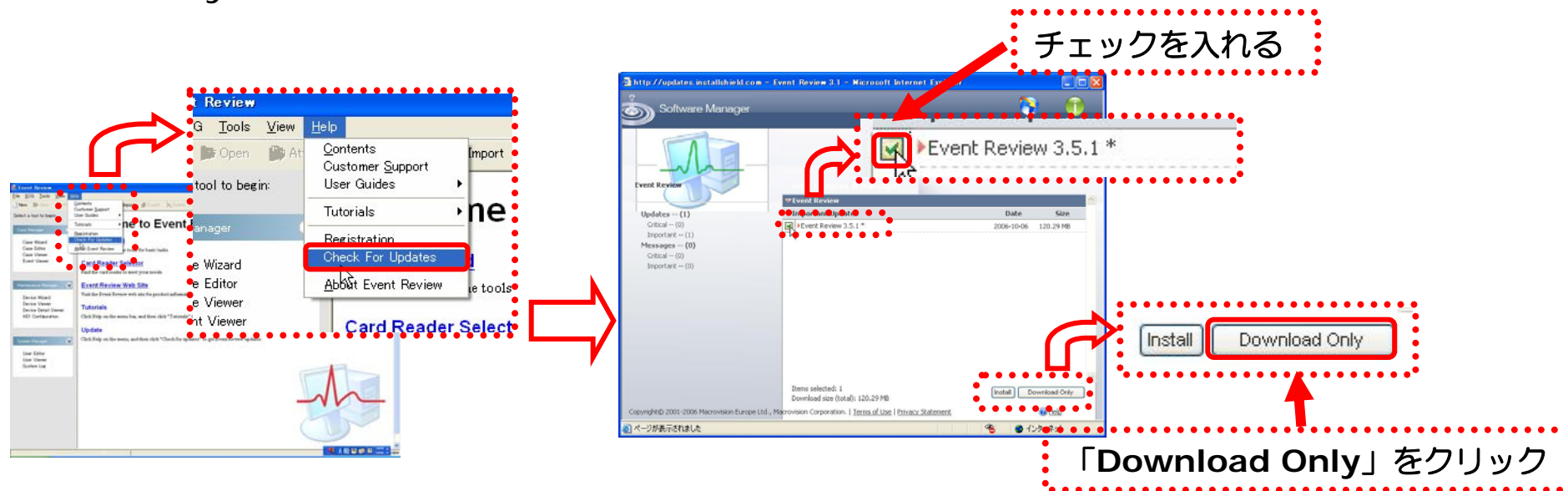


※ ダウンロードするプログラムは約120MBあり、ダウンロードに数時間かかることがあります。プログラムは「Install」ではなく 「Download Only」をお勧めします




Laerdal
helping save lives

アップデートファイルの実行

- I. ダウンロード完了後、「er351setup」プログラムをダブルクリックし「実行」して下さい。
- II. インストール中に、Event Review 3.1 がアンインストールされます。

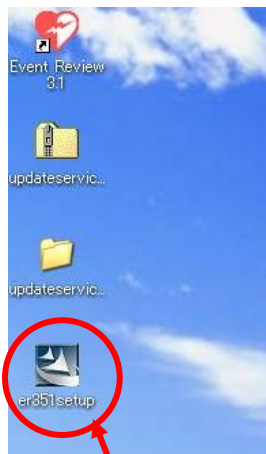

「er351setup」をダブルクリック

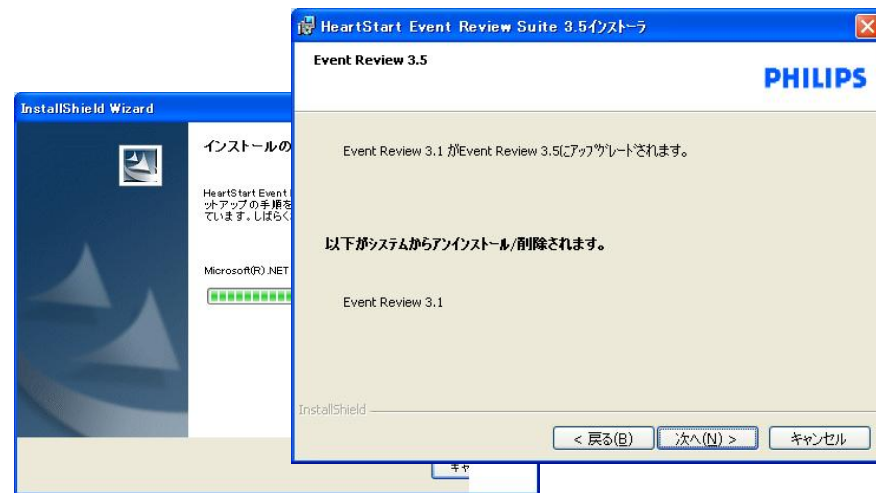

Event Review 3.1 がアンインストールされます





Laerdal
helping save lives

Event Review 3.5の起動

1. インストール完了後、「スタート」→「すべてのプログラム (P)」→「Event Review 3.5」→「Event Review」をクリックすると Event Review 3.5が起動します。

※ デスクトップ上の「Event Review」へのショートカットは削除されているので、ここに表示されている「Event Review」を右クリックし、デスクトップ上へドラッグを行い、ショートカットを作成することをお勧めします

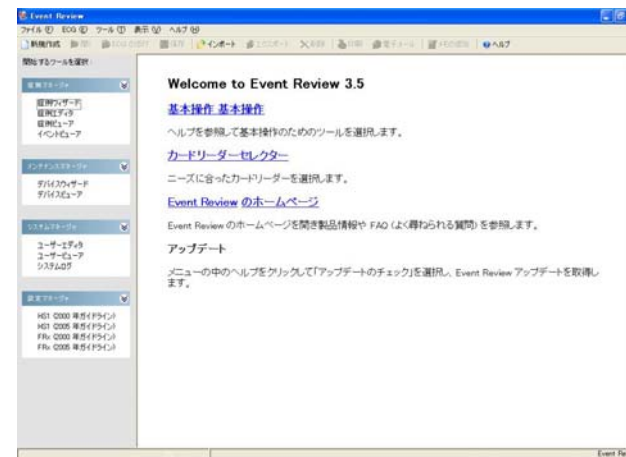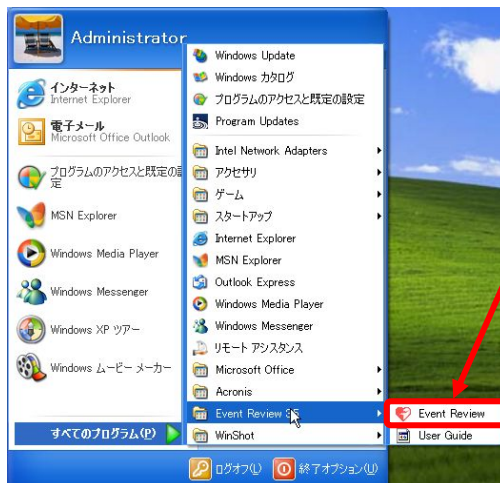

Laerdal
helping save lives



Laerdal

helping save lives